



# KRISTAL

Sapphire Bracket



 **KRISTAL**

IMPLANTOLOGY - ORTHODONTICS

Kristal S.r.l. Via F.lli Rosselli 64 - 20090 Trezzano S/N (MI)

Tel. 02 4453401 - Fax 02 48408305 - [info@kristasrl.net](mailto:info@kristasrl.net) - [www.kristasrl.net](http://www.kristasrl.net)

# KRISTAL

Bracket realizzato in **zaffiro mono cristallino** con elevate qualità estetiche grazie alla perfetta e totale trasparenza.

Il metodo di doppia fusione utilizzato per la sua produzione e le micro sfere in zirconia presenti nella base facilitano il bonding ed il successivo debonding.


Il processo produttivo ed il particolare tipo di materiale impiegato permettono di conservare una buona flessibilità del bracket, aumentandone la resistenza all'urto.

Tutto ciò si traduce in un bracket estetico con minori probabilità di fratture o fenditure nello slot.

Il processo di fabbricazione consente inoltre di ottenere bordi e angoli smussati ed arrotondati.

Kristal è disponibile nelle tecniche Roth, M.B.T. ed Edgewise Standard.

*Il codice colore facilita l'identificazione ed il posizionamento*

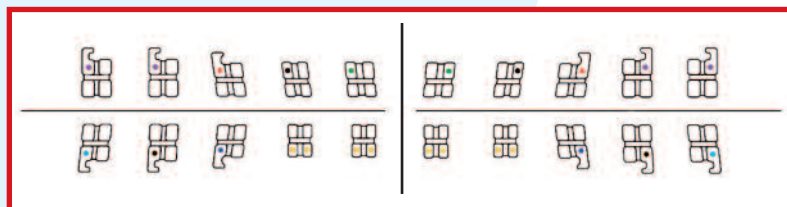


## Caratteristiche

- Prodotti in puro zaffiro monocristallino con metodo di doppia fusione
  - Basso profilo
  - Torque-in-base
- Ottima scorrevolezza dello slot
  - Bordi smussati e arrotondati per un maggior comfort
- Base con microsfere in zirconia per facilitare il bonding e il debonding



# Brackets in zaffiro altamente estetico

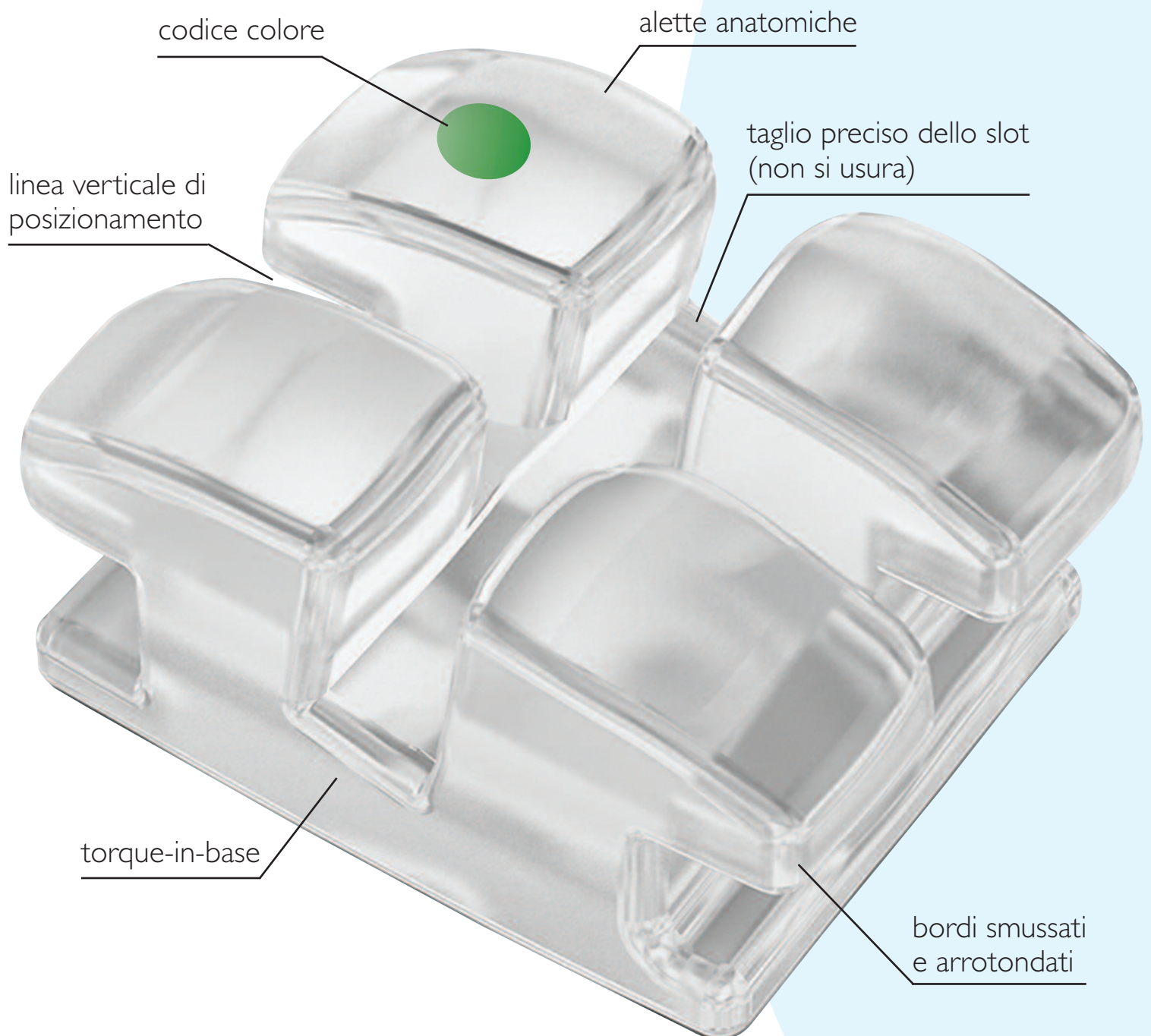

## Confezioni

### KIT:

	Roth		M.B.T		Edgewise std	
	Slot .018	Slot .022	Slot .018	Slot .022	Slot .018	Slot .022
• Bocca completa 3x3 - 12 brackets	180-931	180-930	180-941	180-940	180-951	180-950
• Bocca completa 3x3 c/gancio sui canini - 12 brackets	180-933	180-932	180-943	180-942	180-953	180-952
• Bocca completa 5x5 - 20 brackets	180-935	180-934	180-945	180-944	180-955	180-954
• Bocca completa 5x5 c/gancio sui canini - 20 brackets	180-937	180-936	180-947	180-946	180-957	180-956
• Bocca completa 5x5 c/gancio su canini e premolari - 20 brackets	180-939	180-938	180-949	180-948	-	-

## Roth - Ricambio da 1 pz.

Superiore		T°	A°	Slot .018	Slot .022	Inferiore		T°	A°	Slot .018	Slot .022
Centrale superiore	Dx Sx	11°	5°	180-001 180-002	180-101 180-102	Incisivi inferiori	Dx/Sx	0°	0°	180-045	180-145
Laterale superiore	Dx Sx	8°	9°	180-011 180-012	180-111 180-112	Canino inferiore	Dx Sx	-11°	7°	180-053 180-054	180-153 180-154
Canino superiore	Dx Sx	-2°	8°	180-023 180-024	180-123 180-124	Canino inferiore c/gancio	Dx Sx	-11°	7°	180-051 180-052	180-151 180-152
Canino superiore c/gancio	Dx Sx	-2°	8°	180-021 180-022	180-121 180-122	1°Premolare inferiore	Dx Sx	-17°	3°	180-063 180-064	180-163 180-164
Premolari superiori	Dx/Sx	-7°	0°	180-033	180-133	1°Premolare inf. c/gancio	Dx Sx	-17°	3°	180-061 180-062	180-161 180-162
Premolari sup. c/gancio	Dx Sx	-7°	0°	180-031 180-032	180-131 180-132	2°Premolare inferiore	Dx Sx	-21°	6°	180-073 180-074	180-173 180-174
						2°Premolare inf. c/gancio	Dx Sx	-21°	6°	180-071 180-072	180-171 180-172

## M.B.T. - Ricambio da 1 pz.

Superiore		T°	A°	Slot .018	Slot .022	Inferiore		T°	A°	Slot .018	Slot .022
Centrale superiore	Dx Sx	17°	4°	180-201 180-202	180-301 180-302	Incisivi inferiori	Dx/Sx	-6°	0°	180-245	180-345
Laterale superiore	Dx Sx	10°	8°	180-211 180-212	180-311 180-312	Canino inferiore	Dx Sx	0°	3°	180-253 180-254	180-353 180-354
Canino superiore	Dx Sx	-0°	8°	180-223 180-224	180-323 180-324	Canino inferiore c/gancio	Dx Sx	0°	3°	180-251 180-252	180-351 180-352
Canino superiore c/gancio	Dx Sx	-0°	8°	180-221 180-222	180-321 180-322	1°Premolare inferiore	Dx Sx	-12°	2°	180-263 180-264	180-363 180-364
Premolari superiori	Dx/Sx	-7°	0°	180-233	180-333z	1°Premolare inf. c/gancio	Dx Sx	-12°	2°	180-261 180-262	180-361 180-362
Premolari sup. c/gancio	Dx Sx	-7°	0°	180-231 180-232	180-331 180-332	2°Premolare inferiore	Dx Sx	-17°	2°	180-273 180-274	180-373 180-374
						2°Premolare inf. c/gancio	Dx Sx	-17°	2°	180-271 180-272	180-371 180-372

## Edgewise std - Ricambio da 1 pz.

Superiore		T°	A°	Slot .018	Slot .022	Inferiore		T°	A°	Slot .018	Slot .022
Centrale superiore	Dx/Sx	0°	0°	180-401	180-501	Incisivi inferiori	Dx/Sx	0°	0°	180-445	180-545
Laterale superiore	Dx/Sx	0°	0°	180-411	180-511	Canino inferiore	Dx/Sx	0°	0°	180-423	180-523
Canino superiore	Dx/Sx	0°	0°	180-423	180-523	Canino inferiore c/gancio	Dx Sx	0°	0°	180-451 180-452	180-551 180-552
Canino sup. c/gancio	Dx Sx	0°	0°	180-452 180-451	180-552 180-551	Premolari inferiori	Dx/Sx	0°	0°	180-433	180-533
Premolari superiori	Dx/Sx	0°	0°	180-433	180-533						