
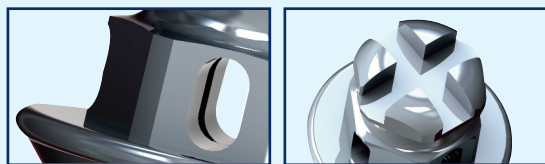


Minivite ortodontica Storm

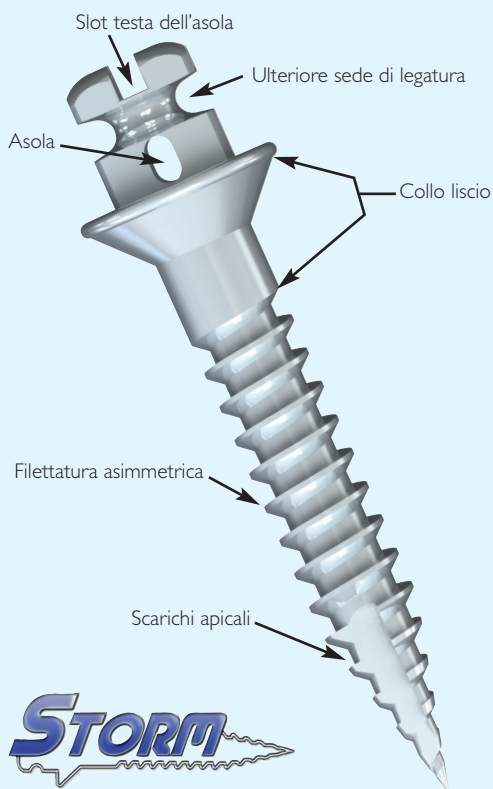

Asola misura .022"x.028"

Testa dell'asola Slot .022"x.028"

Minivite ortodontica Storm: *semplice, sicura e versatile*

La **microvite Storm** nasce dalla combinazione della tecnologia Lancer con l'esperienza clinica di un gruppo di ortodontisti specializzati nell'ancoraggio scheletrico.

Storm è la soluzione più efficace per le comuni esigenze di ancoraggio in ortodonzia.

Facile da inserire e rimuovere, è dotata di più sedi di legatura per la massima semplicità di impiego all'interno del cavo orale.

Realizzata in titanio grado 5 per l'applicazione anche in pazienti allergici al nichel ed è disponibile in tre misure con colorazione superficiale che ne consente l'identificazione.

Semplice

Storm è disponibile in tre misure, la colorazione superficiale ne consente l'identificazione immediata: blu, celeste, alluminio. La porzione intraossea, dotata di filetto asimmetrico, promuove l'atraumaticità del dispositivo e migliora la distribuzione degli sforzi nell'area perimplantare. Autoflettante ed autoporfante, grazie agli scarichi apicali, permette in molti casi l'inserzione senza l'utilizzo di frese, con evidente vantaggio per il paziente.

Sicura

Durante il ciclo produttivo, la microvite Storm viene sottoposta ad accurati lavaggi, a decontaminazione in ambiente acido e sterilizzazione a radiazioni ionizzanti. La sterilità del dispositivo riduce i rischi di contaminazione e rende la microvite Storm pronta all'uso in qualsiasi momento. La filettatura asimmetrica dotata di scarichi apicali fa del dispositivo un ancoraggio stabile ed immediato per il trattamento ortodontico. L'utilizzo del titanio grado 5 ne assicura la stabilità meccanica.

Versatile

La versatilità della microvite è dimostrata dalla presenza di diverse sedi di legatura: l'ancoraggio o il passaggio di ausiliari ortodontici metallici o elastici può avvenire tramite lo slot sulla testa, nell'asola che replica esattamente la funzione di un tubo ortodontico o infine, tramite un'ulteriore sede di legatura posta tra le due precedenti. Le tre sedi sono state progettate per essere utilizzate contemporaneamente e senza interferenze. Le tre misure disponibili consentono di avere un dispositivo appropriato per ogni situazione o esigenza clinica. La porzione transgingivale della microvite Storm ha lunghezza variabile che permette alla microvite di adattarsi al meglio allo spessore della mucosa, accrescendo ulteriormente la flessibilità di utilizzo.

Microvite Storm - Confezionata in flacone sterile e istruzioni d'uso.

- **blu** Ø 1,5 mm - collo 1,5 mm (lunghezza intraossea 8 mm; lunghezza totale 12,38 mm)
- **celeste** Ø 2 mm - collo 1,5 mm (lunghezza intraossea 10 mm; lunghezza totale 14,38 mm)
- **alluminio** Ø 2 mm - collo 3 mm (lunghezza intraossea 10 mm; lunghezza totale 15,88 mm)

Codice

L097
L098
L099

Kit chirurgico Storm


Contenitore in materiale plastico autoclavabile a 134°C con tray interno estraibile contenente: cacciavite manuale completo di dispositivo pick-up, 2 connettori per contrangolo (uno lunghezza 20 mm e l'altro 25 mm), fresa Ø 1,1 mm (lunghezza 7 mm), fresa Ø 1,4 mm (lunghezza 8 mm) e mandrino manuale.

L100

Ricambi Storm

- Cacciavite manuale
- Connettore per contrangolo - lunghezza 20 mm
- Connettore per contrangolo - lunghezza 25 mm
- Fresa Ø 1,1 mm/lunghezza 7 mm
- Fresa Ø 1,4 mm/lunghezza 8 mm
- Mandrino manuale

L101
L102
L103
L104
L105
L106

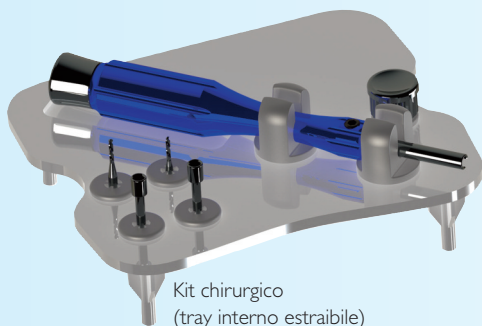

Kit chirurgico
(tray interno estraibile)

